

HEADQUARTERS

Apex Medical Corp.
No. 9, Min Sheng St., Tu-Cheng,
New Taipei City, 23679, Taiwan
T +886 2 2268 5568
F +886 2 2268 6525
marketing@apexmedicalcorp.com

PAN-ASIA

TAIWAN
Apex Medical Corp.
No. 9, Min Sheng St., Tu-Cheng,
New Taipei City, 23679, Taiwan
T +886 2 2268 5600 /0800 054 133
F +886 2 2268 6526
customer@apexmedicalcorp.com

STURDY INDUSTRIAL
168, Sec.1, Zhongxing Road, Wugu District,
New Taipei City 24872, Taiwan
T +886 2 2981 5245
F +886 2 2984 8208
foreign@sturdy.com.tw
www.sturdy.com.tw

CHINA
Apex Medical (Kunshan) Corp.
No. 1368, ZiZhu Road, Kunshan,
Jiang Su Province, China
T +86 512 8617 1660 Ext 1150
F +86 512 8617 8663
customer.cn@apexmedicalcorp.com

INDIA
Apex Medicalcorp India Pvt. Ltd.
303, Third Floor Block 4A DLF
Corporate Park Phase-III,
Gurgaon, Haryana
T +91 11 6654 4138
F +91 11 6654 4052
enquiries.india@apexmedicalcorp.com

THAILAND
Apex Medical Thailand
65/100 Chamnanphenjati Business Center Bldg.
11/F Rama 9 Road, Huaykwang
Bangkok 10320
T +662 948 4848
F +662 948 4170
sales.thai@apexmedicalcorp.com

MIDDLE EAST • AFRICA
29, Misr Liltameer Building,
Stree#10, AREA#8, Sheraton Building, Heliop-
olis Cairo, Egypt.
T +202 2 2671303
F +202 2 2678649
raafat.wahby@apexmedicalcorp.com

PAN-EUROPE

SPAIN
Apex Medical S.L.
Elcano 9, 6ª planta 48008
Bilbao. Vizcaya. Spain
T +34 94 4706408
F +34 94 4706409
info@apexmedical.es

UK
Apex Medical Limited
Unit 21, Optima Park, Thames Road,
Crayford, Kent DA1 4QX
T +44 (0) 132 2520 560
F +44 (0) 132 2554 182
enquiry@apexmedicalcorp.co.uk

FRANCE
Apex Medical France SAS
8 Blvd. de l'Épervière,
49000 Écouflant,
Pays De La Loire, France
T +33 2 72 79 27 13
F +33 2 85 73 07 67
info.france@apexmedicalcorp.com

GERMANY
SLK Vertriebsgesellschaft GmbH
Lindenhorster Straße 38-40 44147
Dortmund
T +49 (0)231-925360-175
F +49 (0)231-925360-29
info@slk-gmbh.de
www.slk-gmbh.de

AMERICAS

USA
Apex Medical USA
927 Mariner Street,
Brea, CA 92821, USA
T +1 714 671 3818
F +1 714 494 8173
sales.usa@apexmedicalcorp.com



TURNING
Mattress

Pro-care Turn
Colchón de Aire Lateralizador

■ Apto para pacientes con alto riesgo de sufrir úlceras por presión

■ Terapia de 30 ° de lateralización para un mayor alivio de presión

■ Disponible terapia 3 en 1 para el cuidado del paciente y reducción del esfuerzo del re-posicionamiento


■ Diseñado para uso en unidades de agudos .



Pro-care Turn

Colchón de aire Lateralizador

“Un punto de inflexión para un cuidado óptimo del paciente”

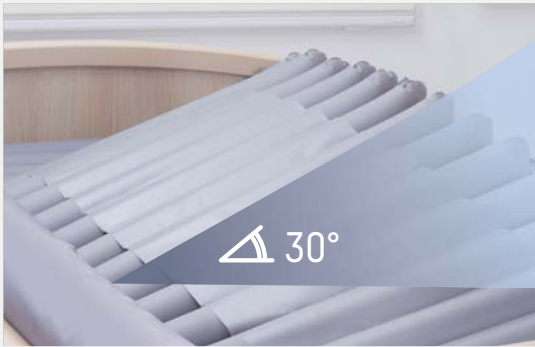

Aumenta el alivio de la presión con 30° de lateralización

La lateralización reduce de forma significativa la presión del paciente, a la vez que aumenta la circulación capilar ^{*1*}^{*2}

La lateralización en 30° de rotación no solo cumple con las guías clínicas, sino que también provee de un confort óptimo.^{*3}

Referencias:

*1 Peterson MJ et al., Effects of turning on skin-bed interface pressures in healthy adults. Journal of advanced nursing. 2010

*2 Peterson MJ et al., Patient repositioning and pressure ulcer risk—Monitoring interface pressures of at-risk patients, JRRD 2013

*3 Prevention and Treatment of Pressure Ulcer: Clinical Practice Guideline (NPUAP/EPUAP/PPPIA 2014)



Funda Bielástica

- Anti-bacteriana
- Bajo fricción y efecto cizalla
- Permeable al vapor y resistente al agua
- Retardante al fuego

Reduce el efecto cizalla y la fricción ayudando así a la prevención de úlceras por presión. Sus costuras soldadas ayudan a prevenir que cualquier líquido entre en el colchón



Anti-bacteriana



Bielástica



Permeable al vapor



Retardante al fuego



Seat Inflation

Ofrece un soporte extra en el área del sacro al sentarse



Guías para cable


Reduce el riesgo de tropiezo



El colchón puede

desinflarse rápidamente en menos de 15 segundos para la realización de RCP al paciente

Comodidad Y Estabilidad

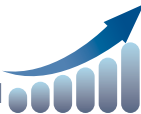

Refuerzos laterales

Aumentan la protección del paciente reduciendo el riesgo de ser atrapado por los rieles de la cama.

Celdas rectangulares

Aportan un alivio de presión óptimo al redistribuir la presión corporal de manera uniforme.

Micro Low Air Loss

Proporciona una buena ventilación y ayudar a reducir la acumulación de calor y la humedad

Posición

≤ 32mmHg (30")

Cartografía de presión

(peso 75 kg)

Giro Izquierda

97%-99%



Posición Supina

95%



Giro derecha

97%-99%



Alivio efectivo de la presión por Lateralización

La cartografía muestra la imagen del cuerpo de un paciente con 30° de lateralización donde se aprecia un alivio de presión clínicamente testado.

La "terapia alternativa de 20 minutos" se iniciará automáticamente, cuando se alcanza el ángulo de giro establecido, para asegurar un alivio de la presión ininterrumpido durante la terapia de lateralización, con tiempo de ciclo establecido de 20, 30 o 60 minutos



Función Heel Relief

Se pueden desinflar las celdas de los talones de forma individual para evitar que estén en contacto con el colchón




Alarma visual y sonora

■ Baja Presión ■ Fallo eléctrico

■ Soporte Técnico

Modo de transporte

Una vez con la tapa puesta, cambia instantáneamente al modo "colchón de aire estático" para su adecuado transporte (8 horas)

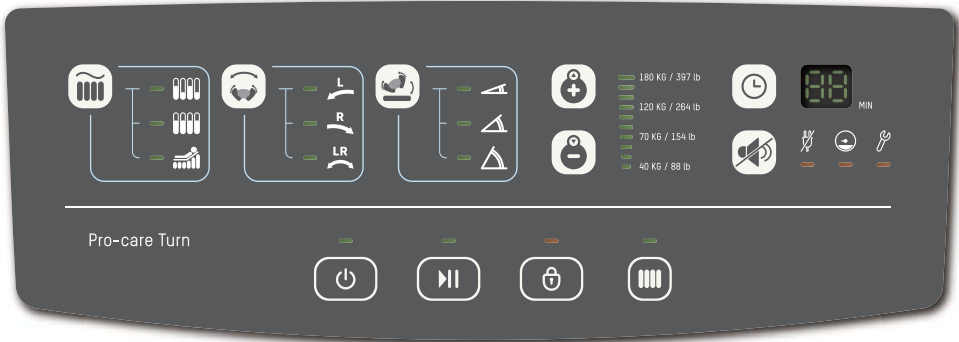

Terapia 3 en 1

- Las Terapias: Alternante, Lateralizadora y Baja Presión Continua se adaptan al plan de cuidado individual del paciente



Personalizable para un funcionamiento óptimo:

- Selección del ángulo de giro y del nivel de la presión.
- Facilita el reposicionamiento a los cuidadores.
- Se puede seleccionar el modo "Lateralización de un lado" presionando el botón de "modo de giro" durante 3 segundos



Función pausa de lateralización:

-Ante cualquier imprevisto es posible detener el compresor de forma inmediata durante 10 minutos



Función Max Firm:

- La función de Max Firm puede iniciarse para un mejor apoyo cuando se realiza el traslado de un paciente o cuidados de enfermería, volviendo al modo anterior establecido al cabo de 20 minutos

Especificaciones

Modelo	Pro-care Turn	Recambio de 5''
Compresor	Dimensiones	34,1 x 16,5 x 26,0 cm
	Peso	4,5 kg
	Material	Retardante al fuego ABS
	Voltaje	230V / 50Hz
	Tiempo de ciclo	10, 15, 20, 25 min.
	Dwell Time	10, 20, 30, 60 min.
Colchón	Dimensiones	200 x 90 x 13 cm, refuerzos laterales de 25 cm
	Altura de celda	13 cm Celdas sobre celdas con giro desde la 4ª hasta la 12ª celda
	Peso	11,4 Kg
	Material de la funda	Bielástica
	Material de la celda	TPU
	Peso máximo del paciente	180 kg
Certificaciones		EN 597-1 & EN 597-2