

ÚLCERAS POR PRESIÓN



Superficies Especiales para el Manejo de la Presión

Posicionadores



care of sweden

SUPPORTING LIFE

CuroCell® AREA Zone

CuroCell® AREA Zone es una SEMP que combina espuma y aire para lograr una eficaz redistribución de la presión y un gran confort. Es autoajutable y no necesita energía. Se trata de un flexible sistema SEMP de sustitución que puede ser utilizado en todo tipo de entornos de sanitarios, de fácil uso y manejo.

CuroCell® AREA Zone se utiliza como ayuda en la prevención y tratamiento de las úlceras de decúbito hasta la categoría 3⁽¹⁾. El peso recomendado del usuario es de hasta 230 kg.⁽²⁾

CuroCell® AREA Zone está diseñado específicamente para su uso como ayuda eficaz en la prevención de las úlceras de decúbito. Esta SEMP tiene unas propiedades excelentes en lo relativo a presión, fricción y humedad^(2,3), tres importantes elementos para prevenir o tratar eficazmente las úlceras de decúbito, y combina espuma y aire para lograr una excelente

redistribución de la presión. Contiene nueve cámaras de aire divididas en zonas que se adaptan automáticamente al usuario proporcionándole un ajuste individualizado.

Está formado por varias capas de espuma de alta calidad. El especial diseño de la SEMP reduce las fuerzas de cizalla y, gracias a su sección inclinada en la zona de los pies, también reduce la presión en los talones.

CuroCell® AREA Zone tiene unas propiedades excelentes de redistribución de la presión y, en pruebas externas, ha recibido la clasificación de "Alivio elevado de la presión"⁽²⁾. En las pruebas sobre la capacidad de redistribución de la presión de la SEMP (PAI), se ha registrado que el 100% de la presión se ha mantenido por debajo del umbral de 30 mmHg (con una carga de 80 kg).



Especificaciones

Tipo: SEMP Híbrido aire-espuma de redistribución de la presión⁽¹⁾

Altura: 18 cm

Función: Prevención y tratamiento hasta la categoría 3

Peso máximo: 0-230 kg⁽²⁾

Garantía: 5 años

Limpieza de la funda: Limpiar con un agente limpiador; desinfectar con un desinfectante con base de alcohol. Lavar a máquina a 95° C como máximo y secar en secadora.

Prestaciones y características

- Flexible y autoajutable
- Protector integrado para talones
- Sistema zonal en la parte superior del colchón
- Función para reducir las fuerzas de fricción y cizalla
- Laterales reforzados para mejorar la estabilidad lateral
- Funda higiénica con costuras soldadas
- Cubierta interior deslizante de alta calidad
- Asas para el transporte
- Etiquetas exclusivas en el colchón y en la funda
- De fácil manejo y mantenimiento

Medidas

CuroCell® AREA Zone está disponible en muchos tamaños. Los modelos estándar tienen 80, 85, 90, 105 y 120 cm de ancho, y 200 y 210 cm de largo. Si necesita otros tamaños, rogamos que se ponga en contacto con nosotros.



Opcional

- Bolsa robusta de transporte y almacenamiento



Lea el código QR para ver el vídeo de presentación.

(*) Vea la Bibliografía en la página 14

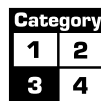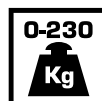

Fundas

Las fundas son una parte importantísima de las SEMP, por un lado son la capa más cercana al usuario y por otro facilitan el correcto desempeño de las propiedades físicas de la SEMP.

Todas las fundas de Care of Sweden son Bi-elásticas y tienen una capa de baja fricción que disminuye las fuerzas de fricción y cizalla durante el movimiento, el posicionamiento o la transferencias del usuario, así como durante la articulación de la cama.

Mantener las fundas en buen estado es garantía de durabilidad, confort y seguridad para el paciente.



Funda sanitaria (Funda completa o solo la parte superior)



Olivia^(1,2)

- Color: gris.
- Composición: 55 % poliéster/45 % revestimiento de poliuretano.
- Norma de ignición: EN 597-1, -2.



Steel^(1,2)

- Color: azul.
- Costuras soldadas.
- Composición: 44 % poliamida/56 % revestimiento de poliuretano.
- Norma de ignición: EN-597-1, -2.



Stone^(1,2)

- Color: gris.
- Costuras soldadas.
- Composición: 61 % poliamida/39 % revestimiento de poliuretano.
- Norma de ignición: EN-597-1, -2, BS 6807 fuente 5.



BOB Extreme/Negro^(1,2)

- Color: azul-negro.
- Asa en los lados largos y en los cortos.
- Compatible con el colchón Optimal BOB.
- Composición: 40 % poliamida/60 % poliuretano.
- Norma de ignición: EN-597-1, -2.

Partes inferiores

Parte inferior Evac^(1,2)

- Color: negro.
- Equipado con correas de velcro para la fijación en situaciones de emergencia.
- Composición: 100% poliéster y poliuretano.
- Se puede combinar con distintas partes superiores.
- Norma de ignición: EN-597-1, -2, BS 6807 fuente 5.



Parte inferior CuroCell^(1,2)

- Color: negro.
- Composición: 100% poliéster y poliuretano.
- Norma de ignición: EN-597-1, -2, BS 6807 fuente 5.



Parte inferior CuroCell Extreme^(1,2)

- Color: negro.
- Composición: 40 % poliamida/60 % revestimiento de poliuretano.
- Norma de ignición: EN-597-1, -2, BS 6807 fuente 5.



Parte inferior Optimal 5zon Plus^(1,2)

- Color: negro.
- Asa funcional para mover el colchón, en los lados cortos y largos.
- Compatible con el colchón Optimal 5zon Plus.
- Composición: 100 % poliéster y poliuretano.
- Norma de ignición: EN-597-1, -2.



Bibliografía Fundas

- (1) ISO 16603 "resistencia a la penetración de sangre y líquidos corporales", ISO 16604 "resistencia a la penetración de patógenos de transmisión hemática", EN 14126, SS 876 00 19 "Textiles de atención sanitaria - Penetración de bacterias - Humedad".
- (2) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.

La funda EVAC está desarrollada para la realización de evacuaciones en caso de emergencia, con usuarios de hasta 130Kg.

Consulte con nosotros para más información



Información

- Barrera contra fluidos, permeable al vapor, el vapor se elimina, se reduce el riesgo de maceración de la piel.
- Suave, elástica.
- Cuidado/mantenimiento sencillos.
- Limpiable, desinfección de la superficie, lavado a 95 °C, se puede secar en la secadora.
- Disponible en distintos tamaños.
- Cremallera antigoteo.
- Cumple la norma SS 876 00 01.

Bibliografía SEMP

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel y Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevención y tratamiento de las úlceras de decúbito: Guía de referencia rápida. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

(2) "EN ISO 11201 Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment Determination of emission sound pressure levels", SP 2015.

(3) ISO 16603 sobre "resistencia a la penetración de sangre y fluidos corporales", ISO 16604 sobre "resistencia a la penetración de patógenos transmitidos por la sangre", EN 14126, SS 876 00 19 sobre "Tejidos para uso en entornos sanitarios – Penetración de bacterias – Humedad".

(4) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.